



Gorunner

Massagepistol - manual

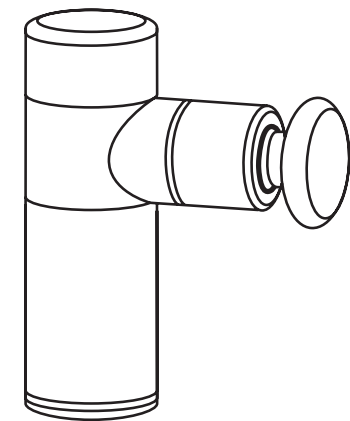

GORUNNER G


Massagepistol

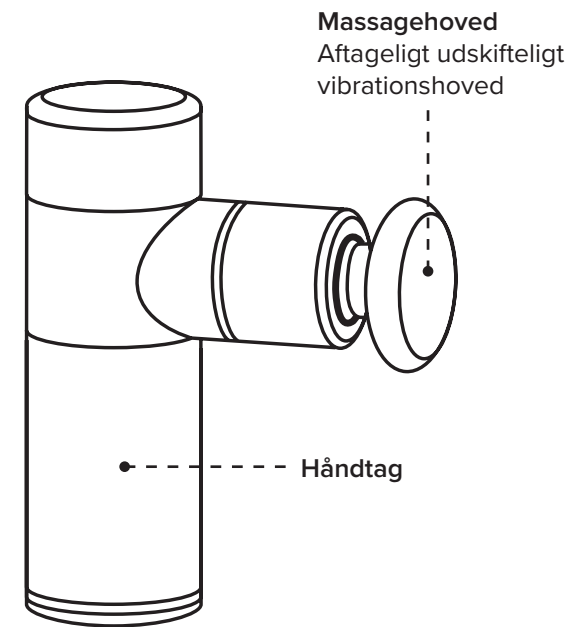


Vibrationshoveder



Fladt vibrationshoved
Velegnet til muskel-
afslappende massage

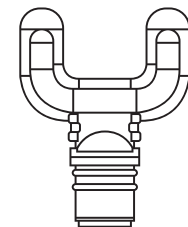

U vibrationshoved
Velegnet til massage
i nakken og akilles-
senen

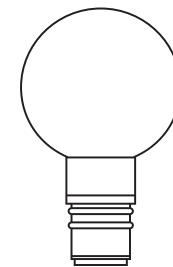


Kugle vibrationshoved
Velegnet til forskellige
muskel massage



Lille smal vibrationshoved
Velegnet til massage i
nakken og akillessenen

Tænd og sluk knap

Tryk ind i 1 sekund for at tænde.
Tryk i tre sekunder for at slukke.

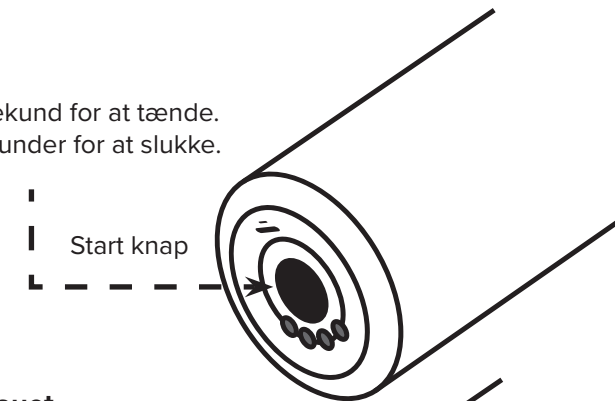


Juster niveauet

Maskinen er på 1. niveau, når
du tænder for den.


Tryk én gang på knappen
Start for at stige i et niveau.

Det maksimale niveau er det
4. niveau.

Er du på 4. niveau, skal du
trykke en gang på startknap-
pen for at gå tilbage til 1.
niveau

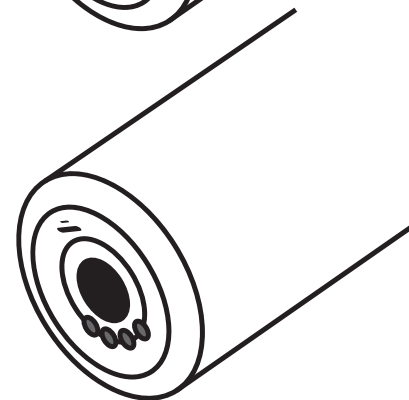


Skift mellem vibrationshovederne

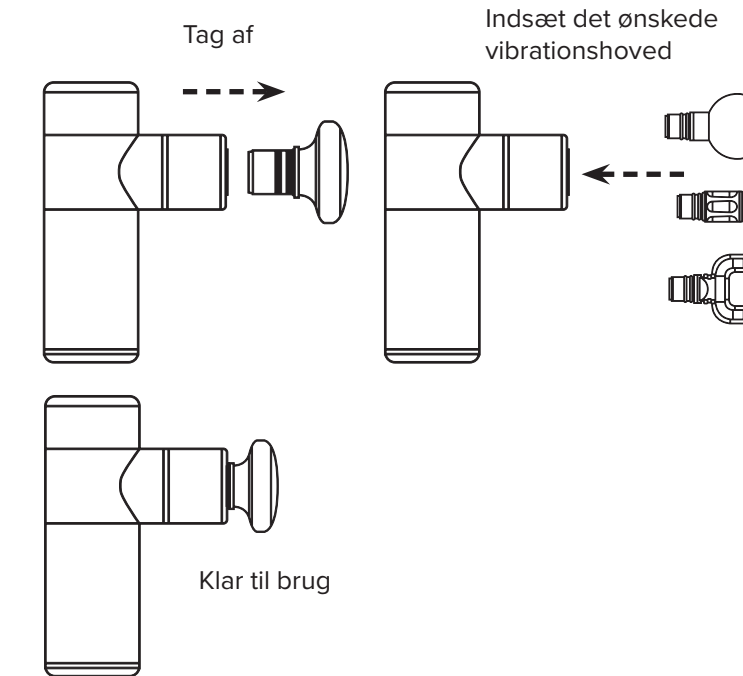

Indikator- og signallys

Indikatorlampen angiver massagepistolens hastighedsniveauer:


- 1 lys = niveau 1
- 2 lys = niveau 2
- 3 lys = niveau 3
- 4 lys = niveau 4

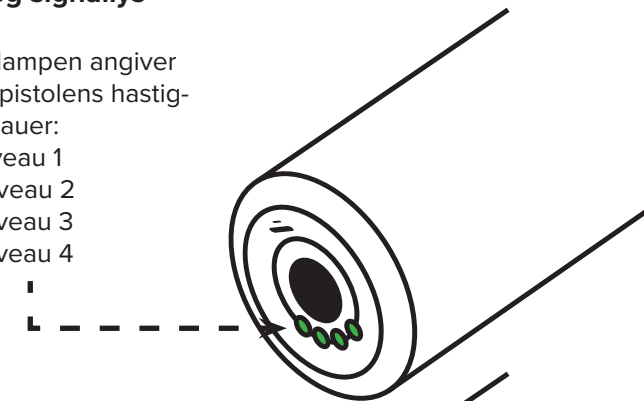


Når massagepistolen tændes, lyser signallampen med grønt et stykke tid og blinker grønt tre gange.

Signallampen lyser med rødt lys under opladning.

Signallampen lyser grønt, når den er fuldt opladet.

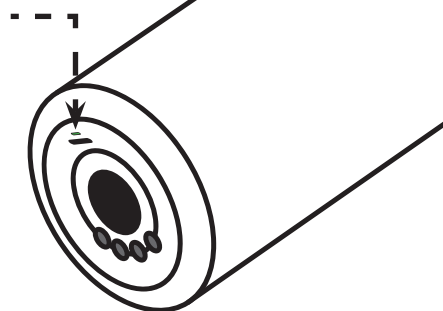

Opladning

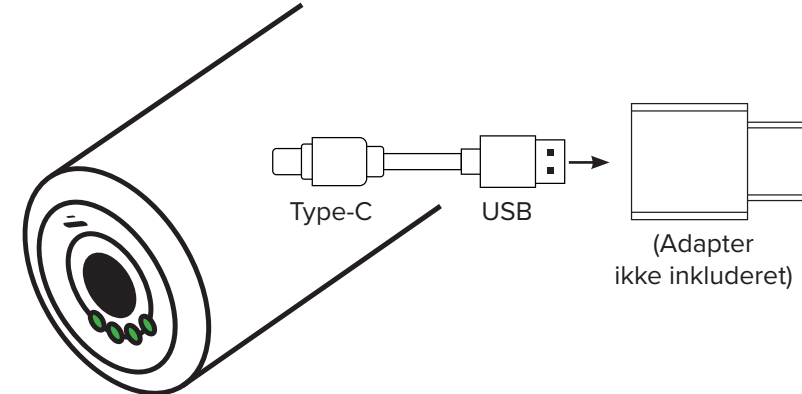

- Oplad maskinen helt, når den bruges første gang.
- Signallampen er rød ved opladning og grøn når fuldt opladet
- Når der ikke er strøm, blinker både signallampe og indikatorlys, når maskinen tændes.

FOR SIKKERHEDS SKYLD MÅ DU IKKE BRUGE MASSAGEPISTOLEN UNDER OPLADNING.


Indikationer

- Smerter og kramper fra en muskelkonstruktion, forstuvning eller belastning
- Hjælper væskestrømmen i hævede områder
- Afslapper og fortykker bindevæv og fascia
- Reducerer ophobning af mælkesyre i muskler
- Forøg bevægelsesområdet
- Eliminerer muskeltræthed

Tabuer

- Aneurismer, blødning, ved hjælp af blodfortyndere
- Hjerteanfald, pacemakere eller hjertestartere
- Gravid, kræft
- Intraartikulær fiksering med 90 dage. Enheden kan ikke bruges indenfor 8 cm af den interne fiksering
- Følsomme områder: hoved, ansigt, hals og hvirveler
- Tæt på skelet med mindre muskler som skinneben, fodryg og håndrygning osv

Oversigt

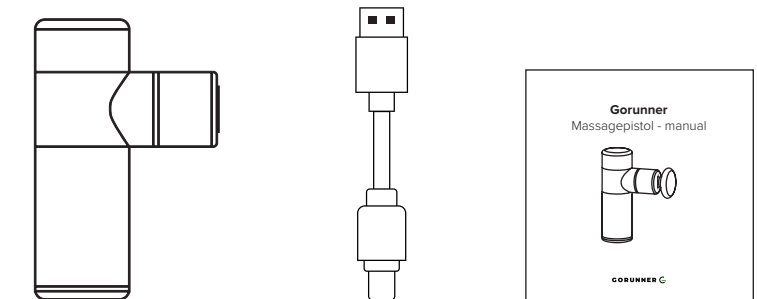


Massagepistol

USB Type-C ladekabel


Manual



Flad hoved

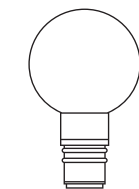

Rund hoved

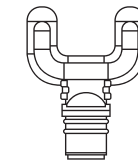

U hoved



Lille rund hoved

